



Phago'wash LD


Preparat do mycia endoskopów, narzędzi i innych wyrobów medycznych w procesie manualnym, ultradźwiękowym i automatycznym.

- szybko i skutecznie usuwa zanieczyszczenia organiczne
- bardzo wydajne stężenie robocze
- roztwór jest bakterio- i grzybobójczy
- doskonale się wypłukuje

Preparat do użytku profesjonalnego.
Wyrób medyczny kl. I

Phago'wash LD

Preparat do mycia endoskopów, narzędzi i innych wyrobów medycznych w procesie manualnym, ultradźwiękowym i automatycznym.

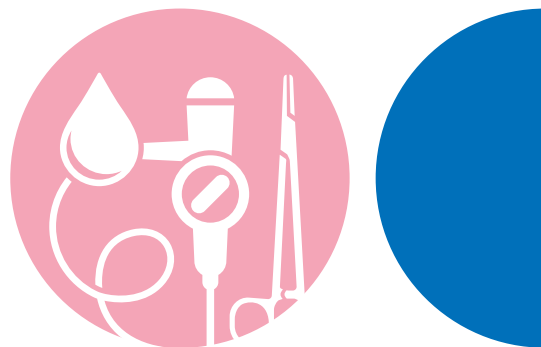

PODSTAWOWE CECHY

- szybko i skutecznie usuwa wszelkie zanieczyszczenia organiczne
- bardzo wydajne, niskie stężenie robocze od 0,1% w procesie ultradźwiękowym oraz 0,4% w procesie manualnym i automatycznym
- roztwór ma właściwości bakterio- i grzybobójcze
- szeroka tolerancja materiałowa potwierdzona badaniami
- narzędzia mogą być bezpiecznie pozostawione w roztworze nawet do 72h
- doskonale się wypłukuje i może być używany do mycia wąskich kanałów endoskopu
- uniwersalny, niskopieniący środek myjący - możliwość zastosowania w automatycznej myjni-dezynfektorze, myjce ultradźwiękowej i manualnie
- zachowuje swoje właściwości niezależnie od temperatury użytej wody

SKŁAD CHEMICZNY

niejonowe i anionowe związki powierzchniowo czynne

SKUTECZNOŚĆ BIOBÓJCZA

Preparat wykazuje potwierdzone badaniami działanie:
bakteriostatyczne, grzybobójcze

OPAKOWANIA

Phago'wash LD: kanister – 5 L
(Nr kat. wewn. – 6481)

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

- pompka do kanistra

INSTRUKCJA UŻYCIA

Produkt do użytku profesjonalnego.

Koncentrat – stosować w roztworach roboczych.

Nie używać do czyszczenia materiałów wrażliwych na produkty alkaliczne (aluminium, miedź, mosiądz itp.).

MYCIE MANUALNE

1. Napełnij wanienkę zimną lub ciepłą wodą.
2. Umieść pompkę dozującą na kanistrze i mocno ją dokręć. Naciśnij pompkę. Jedno naciśnięcie pompki dozuje 20 ml preparatu.
3. W zależności od stopnia zanieczyszczenia wyrobów medycznych na każdy litr wody wlej odpowiednią ilość koncentratu. Zakres zalecanych stężeń: od 0,4% do 0,8%. Zamieszaj roztwór.
4. Całkowicie zanurz narzędzia w roztworze. Wypełnij płynem wszystkie kanały endoskopu.
5. Wanienkę przykryj. Odczekaj zalecany czas kontaktu 5 minut.
6. Wyjmij i wypłucz wyroby medyczne wodą o jakości wymaganej w obowiązującej procedurze.
7. Osusz i poddaj dalszym odpowiednim procesom higienicznym zgodnym z przyjętą procedurą.

MYCIE ULTRADŹWIEKOWE

1. Włącz urządzenie napełnione wodą z kranu i podgrzej wodę do wymaganej temperatury przed dodaniem Phago'wash LD.
2. Umieść pompkę dozującą na kanistrze i mocno ją dokręć. Naciśnij pompkę. Jedno naciśnięcie pompki dozuje 20 ml preparatu.
3. W zależności od stopnia zanieczyszczenia narzędzi na każdy litr wody wlej odpowiednią ilość koncentratu. Zakres zalecanych stężeń: od 0,1% do 0,4%.
4. Całkowicie zanurz narzędzia w roztworze.
5. Wanienkę przykryj. Maksymalny czas kontaktu – 15 minut.
6. Wyjmij i wypłucz wyroby medyczne wodą o jakości wymaganej w obowiązującej procedurze.
7. Osusz i poddaj dalszym odpowiednim procesom higienicznym zgodnym z przyjętą procedurą.

MYCIE AUTOMATYCZNE

1. Otwórz i umieść kanister Phago'wash LD w odpowiednim miejscu urządzenia.
2. Rurę ssącą włóż w szyjkę kanistra, a następnie zaprogramuj urządzenie zgodnie z rodzajem czyszczonych wyrobów medycznych i obowiązującą procedurą.
3. Zakres zalecanych stężeń w zależności od stopnia zanieczyszczenia wyrobów medycznych: od 0,4% do 0,8%. Zalecany czas kontaktu: 5 min. Zalecana temperatura: od 50°C do 60°C.

DYSTRYBUTOR W POLSCE:

MEDILAB Sp. z o.o.

ul. Niedźwiedzia 60 • 15-531 Białystok

T: 085 747 93 00 • F: 085 747 93 01

Ulotka informacyjna – opracowanie Medilab Sp. z o.o. 2412-02

WYTWÓRCA:

Christeys France

31 rue de la Mamadrie

44 120 Verton • Francja

christeys.com



medilab.pl