



Oxivir® Sporicide/Wipe

Gotowa do użycia pianka i chusteczki do dezynfekcji oraz mycia powierzchni, powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych oraz różnego rodzaju wyposażenia.


- szeroka skuteczność biobójcza
- pełne działanie sporobójcze
- dezaktywacja zanieczyszczeń organicznych, w tym plam moczu
- idealne w obszarach wysokiego ryzyka

Preparat do użytku profesjonalnego.
Wyroby medyczne kl. II a, CE 0044
Produkty biobójcze – pozwolenie
nr 6871/17 i 6883/17 (Kat. I, gr. 2)

Treści prezentowane
w niniejszym materiale
przeznaczone są wyłącznie
dla użytkowników profesjonalnych.

 **MEDILAB®**
medilab.pl

Oxivir® Sporicide/Wipe

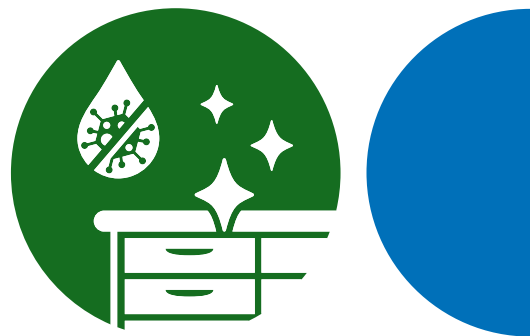

Gotowa do użycia pianka i chusteczki do dezynfekcji oraz mycia powierzchni, powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych oraz różnego rodzaju wyposażenia.

PODSTAWOWE CECHY

- wykazuje szerokie spektrum biobójcze: bakterio-, drożdżako-, grzybo-, prątko- i wirusobójczość (Polio, Adeno, Noro) oraz działanie sporobójcze
- dodatkowo przebadany wg normy sporobójczej EN 17126 i EN 17846 oraz zgodnie z EN 16615
- czas działania: min. 1 min.
- idealny do czyszczenia obszarów wysokiego ryzyka w tym oddziałów intensywnej terapii, oddziałów pediatrycznych, sal pacjentów, izolatek
- inaktywuje zanieczyszczenia organiczne (w tym plamy moczu) i usuwa biofilm
- możliwość stosowania w obecności pacjentów oraz na oddziałach położniczych i noworodkowych
- bezpieczny dla środowiska – nadtlenek wodoru rozpada się na tlen i wodę

SKŁAD CHEMICZNY

- **100 g płynu zawiera:**
nadtlenek wodoru (70 g/kg), kwas glikolowy (9,8 g/kg), związki powierzchniowo czynne
- **Nasączona płynem chusteczka zawiera:**
nadtlenek wodoru (70 g/kg), kwas glikolowy (15 g/kg), związki powierzchniowo czynne

INSTRUKCJA UŻYCIA

Oxivir® Sporicide

1. Produkt gotowy do użycia – nie rozcieńczać!
2. Nanieść na powierzchnię. Zachować zalecany czas ekspozycji.
3. Przetrzeć i pozostawić do wyschnięcia.

Oxivir® Sporicide Wipe

1. Otworzyć opakowanie, wyjąć pojedynczą chusteczkę i zamknąć pokrywę.

Produkty biobójcze należy stosować z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Przed użyciem należy przeczytać etykietę i ulotkę informacyjną.

Postępowanie z odpadami

Skoncentrowana zawartość lub zanieczyszczone opakowanie powinno zostać zutylizowane przez certyfikowanego odbiorcę lub zgodnie z miejscowym pozwoleniem. Odprowadzenie do ścieków nie jest wskazane. Oczyszczzone opakowanie nadaje się do odzysku energii lub recyklingu w zgodzie z lokalnie obowiązującym prawem.

Warunki przechowywania

Magazynować w pozycji pionowej, wyłącznie w oryginalnych, szczelnych i właściwie oznakowanych opakowaniach, w suchych i odpowiednio wentylowanych pomieszczeniach. Przechowywać z dala od żywności, napojów i produktów żywnościowych dla zwierząt. Nie dopuszczać do zamarzania. Nie przechowywać razem z produktami zawierającymi związki wybielające na bazie chloru lub siarczyny. Wchodzi w reakcję z alkaliem.

Środki ostrożności i pierwsza pomoc

Wdychanie: w przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady lub zgłosić się pod opiekę lekarza.

Kontakt przez skórę: zmyć skórę dużą ilością letniej, łagodnie płynącej wody. Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież i wyprać przed ponownym użyciem. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: zasięgnąć porady lub zgłosić się pod opiekę lekarza.

SKUTECZNOŚĆ BIOBÓJCZA

Preparat wykazuje potwierdzone badaniami działanie:

bakterio-, drożdżako- i wirusobójcze (Polio, Adeno, Noro) – 1 min.;
grzybobójcze – 6 min.,
prątkobójcze (M. terae, M. avium) – 10 min.,
wirusobójcze (Polio, Adeno, Noro) – 1 min.
oraz sporobójcze: C. difficile – 1 min.,
C. difficile Rybotyp O27 – 5 min.,
B. subtilis – 15 min.

OPAKOWANIA

Oxivir® Sporicide: butelka – 750 ml ze spryskiwaczem (Nr kat. wewn. 5827)
Oxivir® Sporicide Wipe: tuba – 80 szt. chusteczek
Rozmiar: 20 cm x 30 cm (25 g/m²)
(Nr kat. wewn. 5828)

Wyposażenie dodatkowe:

jednorazowe chusteczki włókninowe

2. Wytrzeć powierzchnię, upewnić się, że cała powierzchnia jest zwilżona, pozostawić do wyschnięcia.

3. Upewnić się, że powierzchnia pozostaje zwilżona przez wymagany czas kontaktu.

Uwaga: nie mieszać ww. produktów z innymi preparatami chemicznymi. Produkty nie są przeznaczone do stosowania na powierzchniach porowatych oraz nieodpornych na działanie kwasów.

Kontakt z oczami: rozchylić powieki i przemywać oczy dużą ilością letniej wody przez co najmniej 15 minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie. W przypadku utrzymującego się działania drażniącego na oczy: zasięgnąć porady lub zgłosić się pod opiekę lekarza.

Połykanie: wypłukać usta. Natychmiast wypić 1 szklankę wody. Nigdy nie podawać niczego doustnie osobie nieprzytomnej. W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady lub zgłosić się pod opiekę lekarza.

Dodatkowe informacje odnośnie środków ostrożności wymaganych przy pracy z preparatem Oxivir Sporicide, zasad udzielania pierwszej pomocy, bezpiecznego postępowania z odpadami produktu i pakowaniem znajdują się w karcie SDS.

PARTNER STRATEGICZNY I DYSTRYBUTOR W POLSCE:

MEDILAB Sp. z o.o.

ul. Niedźwiedzia 60 • 15-531 Białystok • Polska
T: 085 747 93 00

Ulotka informacyjna – opracowanie Medilab Sp. z o.o. 2512-07

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY W POLSCE:

Diversey Polska Sp. z o.o.,

02-305 Warszawa • Al. Jerozolimskie 134
T: 22/328-10-00

WYTWÓRCA:

Diversey Europe Operations B.V.

Maarssebroeksedijk 2 • 3542 DN Utrecht
The Netherlands • diversey.com



medilab.pl