




Wanny dezynfekcyjne

Do sporządzania roztworów oraz dezynfekcji, mycia i transportu narzędzi medycznych i wyposażenia endoskopowego.

- odporne na związki chemiczne zawarte w preparatach dezynfekcyjnych i myjących
- mogą być poddawane dezynfekcji termicznej do 70°C
- estetyczne, wykonane z wytrzymałych materiałów

Wanny dezynfekcyjne

Do sporządzania roztworów oraz dezynfekcji, mycia i transportu narzędzi medycznych i wyposażenia endoskopowego.

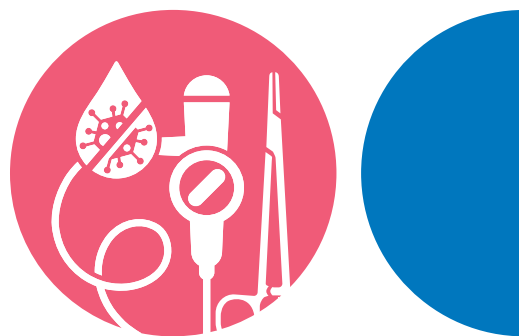

PODSTAWOWE CECHY

- różna pojemność wanien (1L, 5L, 16 L) umożliwia dobranie wielkości do potrzeb użytkownika i ekonomiczne dysponowanie środkami
- łatwe w użyciu i utrzymaniu w higienicznym stanie
- wykonane ze tworzywa sztucznego odpornego na wpływ związków chemicznych zawartych w preparatach myjących i dezynfekcyjnych oraz temperaturę do 70°C
- składają się z trzech elementów: wanny i sita wykonanych z polipropylenu (PP) oraz pokrywy wykonanej z polichlorku winylu (PVC)
- wyprofilowane uchwyty w wannie i sicie ułatwiają ich przenoszenie
- wewnętrzna podziałka wanny umożliwia dokładne dozowanie wody
- perforowane sito ułatwia płukanie narzędzi oraz ogranicza kontakt personelu z roztworem roboczym preparatów
- pokrywa szczelnie zabezpiecza przed parowaniem roztworu z wanienki
- w wannach 1L i 5L specjalne płytki dociskowe pomagają w całkowitym zanurzeniu narzędzi w roztworze środka
- mogą być przechowywane w temperaturach od -50°C do + 40°C (po przechowywaniu w pomieszczeniu poniżej 10°C wanna powinna się nagrząć w temp. pokojowej przez 30 min.)

	1 litr	5 litrów	16 litrów
Wymiary zewnętrzne			
długość	18,5-22,5 cm	32-39 cm	49-53 cm
szerokość	12,5-15 cm	21-26 cm	28-32 cm
wysokość	9 cm	16 cm	15-19 cm
Wymiary wewnętrzne			
długość	18 cm	32 cm	48 cm
szerokość	12 cm	21 cm	27 cm
wysokość	7 cm	12 cm	14 cm
Wymiary sita			
długość	14 cm	26 cm	43 cm
szerokość	11 cm	20 cm	24 cm
wysokość	6 cm	11 cm	12 cm

DYSTRYBUTOR W POLSCE:

MEDILAB Firma Wytwórczo Usługowa Sp. z o.o.
ul. Niedźwiedzia 60 • 15-531 Białystok • Polska
T: 085 747 93 00 • F: 085 747 93 01

Ulotka informacyjna – opracowanie Medilab Sp. z o.o. 2112-02

WYTWÓRCA:

Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH
Kaiser-Wilhelm-Str 133
12247 Berlin • Niemcy
lysoform.de